

# DERMOSSAGE

VACUMTERAPIA

3 AÑOS DE GARANTÍA · FABRICACIÓN NACIONAL · EN TODO EL PAÍS ·  
**RENOVADO  
DISEÑO**



**Equipo digital, totalmente configurable**, las más altas prestaciones para un amplio campo de aplicaciones. Provisto de **un amplio set de piezas**, tanto para tratamientos corporales como faciales. Vacumterapia o terapia sudérmica no invasiva es **una técnica**

**que actúa a nivel hipodérmico realizando un masaje atraumático a presión negativa.**

La misma es capaz de mejorar la irrigación sanguínea local. Los efectos de la terapia resultan de la aplicación de **masajes de distinta intensidad** y de los diver-

sos movimientos que la técnica posibilita. La **Vacumterapia** es muy utilizada para **complementar tratamientos corporales**, ya que cuando las manipulaciones se realizan siguiendo las vías linfáticas se logra el **drenaje linfático convenientes para el tratamiento de la celulitis.**

**googroup**  
electroestética

### FILTRO REUTILIZABLE

**Dermassage Plus** utiliza un filtro reutilizable. Este filtro se encuentra en el interior de un vaso en el cual se depositan los desechos de la exfoliación. Gracias a su tamaño, no es necesario el vaciado en cada uso, y no se necesitan consumibles como descartables.

### CONTROL MONOCOMANDO DIGITAL

Este sistema moderno hace a un control del equipo sumamente sencillo e intuitivo, facilitando el manejo al usuario.

Ademas, es un sistema más robusto, que no se daña con el uso diario como sucede habitualmente cuando se tiene múltiples botones touch.



### DISPLAY DE VISUALIZACIÓN

Amplio display de caracteres grandes para una fácil visualización de los parámetros del equipo.

## INTERFAZ DE USUARIO

**Inicio Rápido:** Permite comenzar la sesión de una manera rápida y variar todos los parámetros de la misma.

**Manual:** Este modo le permite al usuario poder configurar todos los parámetros del equipo según lo requiera.

- **Tiempo:** Hasta 30'.
- **PA (pulsado alto):** 0.1 seg. a 10.0 seg. con paso de 0.1 seg.
- **PB (pulsado bajo):** 0.1 seg. a 10.0 seg. con paso de 0.1 seg.
- **Succión:** 10 niveles seleccionables.

**Personal:** Permite guardar en la memoria del equipo todos los programas personalizados.

## CONFIGURACIÓN

Aquí el usuario podrá configurar:

- **Parámetros iniciales:** Tiempo - PA - PB - Succión.
- **Personal:** Podrá restablecer (borrar) todos los programas guardados.
- **Sonidos:** Podrá activar o desactivar el sonido del equipo.



## PROGRAMAS

Cuenta con una amplia gama de programas pre-configurados que se adaptan a los diversos tratamientos que requiera el profesional, tanto de vacumterapia (Facial - Corporal), como de Microdermoabrasión:

### Vacumterapia:

- Facial
- Moldeo
- Cel. Edematosa
- Cel. Fibrosa
- Adip. Local
- Adip. General
- Drenaje
- Copa fija
- Rel. Muscular
- Pre operatorio
- Post Operatorio

### Microdermoabrasion:

- Peeling suave / medio / fuerte
- Manchas
- Estrías
- Nariz / Comedones
- Codo / Rodilla



## KIT DE 5 PIEZAS

**Dermossage** incluye un kit de **5 piezas de vacumterapia facial** para diversos tratamientos. Drenaje linfático, limpieza, desbloqueo de poros, masaje, comedones, estimulación, tonificación, etc.

### PICO DE PATO

Indicado para movimientos deslizantes o puntuales para estimular el sistema linfático y cicatrizar (excepto en queloides); limpiará los poros y asegurará que la piel no esté demasiado presurizada. También se puede utilizar para trabajar en las líneas faciales o dar un masaje de drenaje linfático.



### CILINDRICO

Para bloqueo de poros, se utiliza para eliminar las áreas específicas de bloqueo que se agrupan y necesitan un tratamiento intensivo.

**Ejemplo:** en la zona de la barbilla. También se utiliza en el tratamiento anti arrugas.



### PICO DE COLIBRÍ

Indicado para extracción de comedones, estímulo circulatorio en arrugas y estrías. La pequeña abertura redonda se coloca sobre el comedón, asegurando que la presión se ejerza de manera uniforme sobre el tejido circundante, para evitar cicatrices. Se recomienda intensidad de succión máxima.

**Recomendación:** Para usar la ventosa para extraer comedones, coloque un filtro de papel fino en el área de agarre del mango.



### COPAS FACIALES

Se utilizan para masaje de drenaje linfático o limpieza general, elevación y estimulación del área, según los contornos faciales del cliente.



## COPAS CORPORALES

Las copas succionan la piel y los rodillos ayudan a drenar el tejido adiposo, movilizándolo hacia el sistema linfático. Se facilita el drenaje del líquido retenido en las células, activando la circulación venosa y linfática necesaria en el tratamiento de la celulitis.



### COPAS DE RODILLOS

Al utilizar las copas con rodillo, se estará priorizando el efecto mecánico de movilización de los distintos planos tisulares.



### COPAS SIN RODILLOS








Al utilizar las copas sin rodillo, se estará potenciando el efecto circulatorio.



### COPAS FIJAS

Se utilizan para el aumento, moldeo y realce de glúteos.

## MANIOBRAS

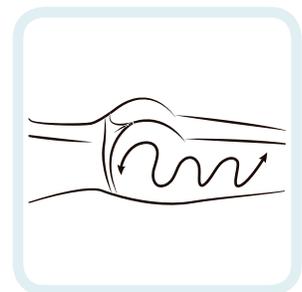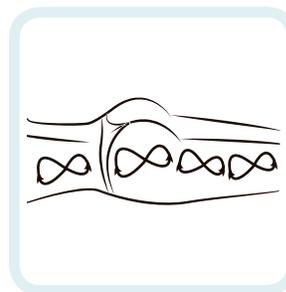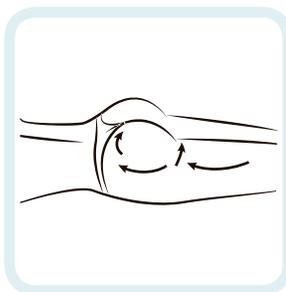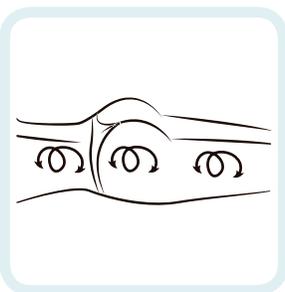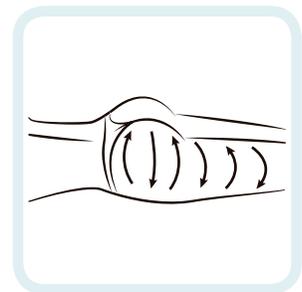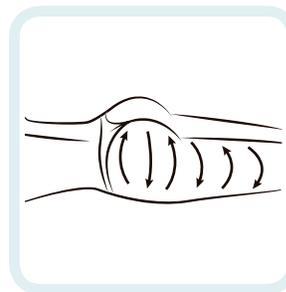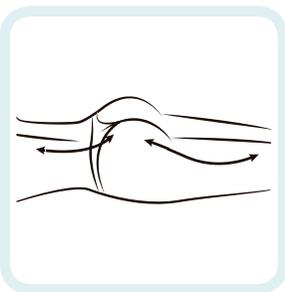

**INTERFAZ DE USUARIO:** DISPLAY 4x20 CARACTERES

**FUNCIONAMIENTO:** MICROCONTROLADOR

**REGULACIÓN DE SUCCIÓN:** DIGITAL. 10 NIVELES

**TEMPORIZADOR:** DIGITAL

**CONTROL DE BOMBA:** PWM

**PRESIÓN NEGATIVA MÁXIMA:** 55cmHg

**FILTRO:** REUTILIZABLE TIPO TRAMPA DE AGUA

**ALIMENTACIÓN:** 220 V / 50 Hz

**CONSUMO:** 55 VA

**FUSIBLE:** F2A1250V

**PESO:** 2,75 Kg

**MEDIDAS:** 325 x 267 x 136 mm

**NORMA:** CLASE I / TIPO BF

#### ACCESORIOS

**COPAS CORPORAL:** 2 COPAS C/RODILLOS, 2 COPAS S/RODILLO

PORTA MANGO / MANGO PARA COPAS

COPAS FIJAS PARA GLÚTEOS

**VACUM FACIAL:** 5 UNIDADES DE VIDRIO

MANGUERA DE SILICONA PARA VACUM FACIAL

CABLE DE ALIMENTACIÓN

MANUAL DE USUARIO




#### OPCIONAL

KIT DE MICRODERMOABRASIÓN

COPAS FIJAS PARA GLÚTEOS



Fabricado bajo norma internacional de seguridad eléctrica IEC 60601.

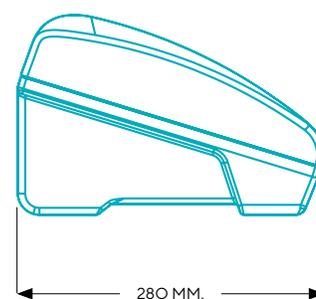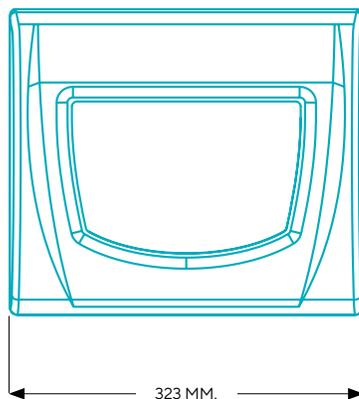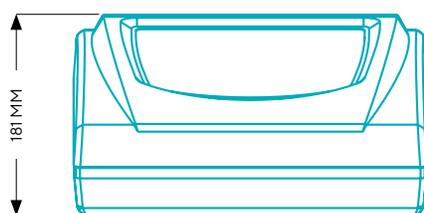

**gogroup**  
electroestética



[www.gogroup.com.ar](http://www.gogroup.com.ar)